


# Toul steriler Instrumententisch

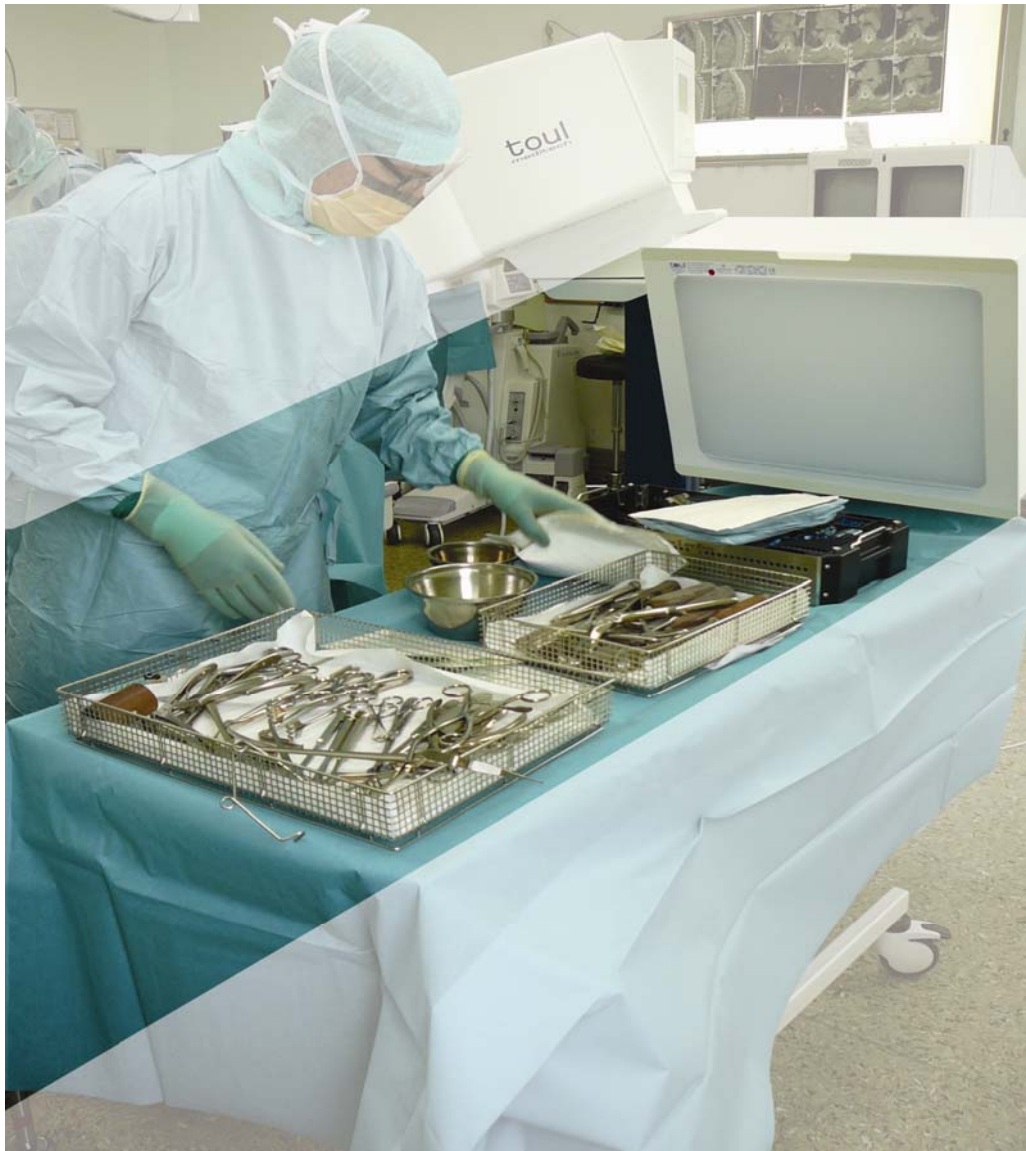

- **Multifunktionales Display**
- **Elektrische Höhenverstellung**
- **Verschiedene Modelle**
- **Einmalschutzschirm garantiert die Sterilität des Luftstroms**

**Toul 300 Instrumententisch damit die Instrumente auch während der Operation steril bleiben**

# Toul 300 Instrumententisch

## Schutz vor Infektion



Die sterilen Instrumente im OP Raum werden in der Regel außerhalb der Schutzzone des Klimafeldes vor der Operation ausgepackt und verlieren damit ihre Sterilität schon vor Beginn der Operation. Mit der Dauer der Operation und der Anzahl der Personen im OP erhöht sich dieses Risiko. Der Instrumententisch Toul 300 schützt die Instrumente und Implantate selbst bei sehr langen Operationen durch keimfreie Luft mittels Hepa Filter (H14)

Der Instrumententisch ist mobil und eignet sich sowohl für den Einsatz in OP Räumen, in denen die Zuluftdecke zu klein ist, um auch die Instrumente zu schützen, als auch für den Einsatz in Vorbereitungsräumen, in denen das Personal Instrumente und sterile Materialien für die Operation vorbereitet.

### Vorteile

- **Sofort einsetzbar**
- **Minimierung des Infektionsrisikos insbesondere bei langen Operationen durch keimfreie Luft (H14 Hepa Filter)**
- **Auspacken von Instrumenten auch außerhalb des OP's möglich**
- **Kürzere OP Rüstzeiten**
- **Keine Verwirbelungen mit bestehenden Lüftungen**
- **Keine Kaltluft**

#### Modelle:

- 1000 mm x 600 mm
- 1400 mm x 600 mm
- 1800 mm x 600 mm

Elektrische Höhenverstellung: 820 mm—1120 mm

#### Normeditec

Da Vinci Str. 12

39100 Bozen (Südtirol)

Tel: + 39/348 730 24 45

Fax: +39/0521/ 37 36 31

Email: [info@normeditec.com](mailto:info@normeditec.com)

[www.normeditec.com](http://www.normeditec.com)

