


SteriStay

– the protective instrument table



L'unità mobile **TOUL STERISTAY** aspira l'aria della sala operatoria dove è posizionata e la purifica tramite un sistema di filtri Hepa14 eliminando il 99,9% di virus, batteri e microorganismi aerodispersi. Tale tecnologia produce continuamente aria sterile **proteggendo gli strumenti e strumentari chirurgici dalla contaminazione** e permettendo quindi una prevenzione efficace delle infezioni batteriche per il paziente.

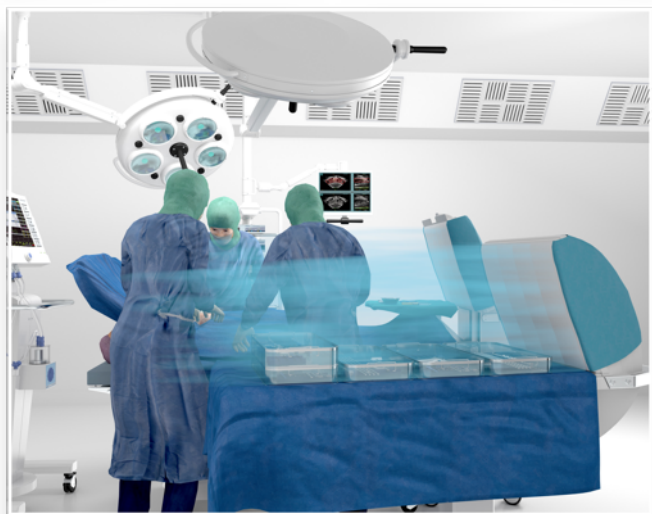

TOUL crea un flusso d'aria laminare focalizzato e orizzontale, **senza interposizione di ostacoli**.

Il flusso d'aria ultrapulita è **diretto** e raggiunge gli strumenti e strumentari, senza interposizione di ostacoli come le lampade scialitiche o la testa dei chirurghi.

TOUL STERISTAY, flusso laminare ultrapulito con tavolo madre integrato, mantiene la sterilità di strumenti e strumentari chirurgici **senza limiti di tempo e per tutta la durata dell'intervento chirurgico**.

Il tavolo madre (133x60cm) è solidale al flusso laminare di aria, si sposta con esso e può essere regolato meccanicamente in altezza. L'unità mobile può essere installata *in pochi minuti* e per il funzionamento necessita solo di una comune presa di corrente. Le ruote gommate, permettono di spostarla velocemente se necessario.



Scopri i molteplici utilizzi di TOUL nella sezione applicazioni e scarica il Depliant della tua specialità!

NORMEDITEC S.R.L.

Via De Gasperi 19, 430108 Sissa Trecasali Tel. 0521/878949 Tel. 3487302445 Fax. 0521/363731
www.normeditec.com info@normeditec.com

Normeditec