
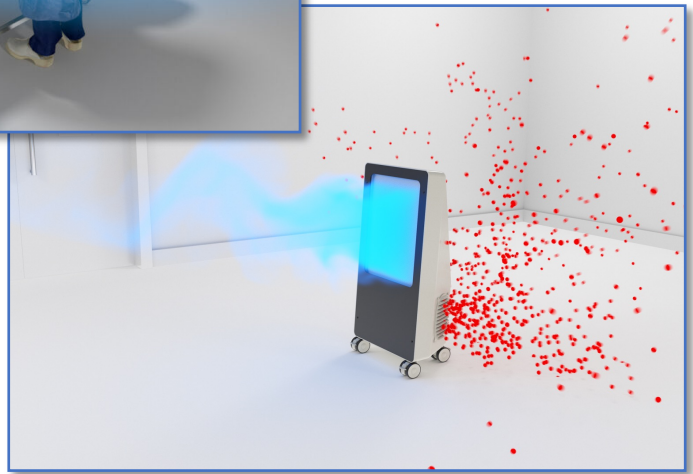


Operio CLINIC

Sistema di ventilazione per ambulatorio veterinario.

Unità mobile di produzione aria ultrapulita per l'impianto di ventilazione di cliniche veterinarie.

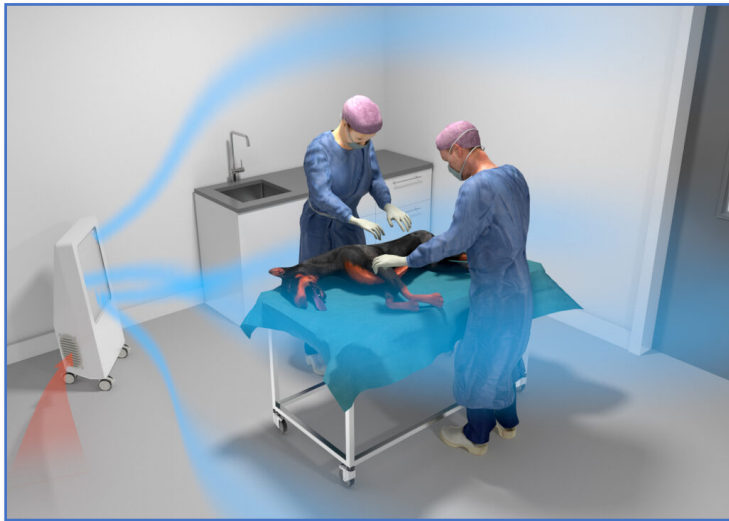

TOUL Operio CLINIC

- Elimina il 99.995% di virus, batteri, polveri sottili, etc.
- Ventilazione meccanica controllata per ambulatorio veterinario.
- Creare sovrappressione in ambulatorio veterinario.
- Aumentare il numero di ricambi/ora d'aria.

Normeditec

Cos'è Operio CLINIC ?

Operio CLINIC è un'unità mobile di purificazione dell'aria destinata all'uso in un qualsiasi ambiente interno e produce un flusso d'aria continuo e ultra pulito.

Operio CLINIC è un dispositivo mobile per la sanificazione dell'aria basato su filtri HEPA 14 che elimina il 99.995% di tutte le particelle aerodisperse, batteriche e virali, polveri e pulviscoli, etc.

Il filtro è dotato anche di una funzione UVC interna, non dannosa per l'utente, che uccide efficacemente tutti i batteri e virus filtrati, compreso il virus corona.

Il dispositivo Operio CLINIC può essere utilizzato per la pulizia dell'aria ambiente in uno spazio chiuso o diretta verso una zona specifica. Nessun lavoro impiantistico è necessario per l'installazione: **il dispositivo necessita solo di una comune presa di corrente.**

SPECIFICHE TECNICHE	
Dimensioni	11 x 47 x 97 cm
Peso	15 Kg
Capacità di pulizia aria / ora: selezione di diverse velocità della ventola	Velocità 1: 200 m ³ /h Velocità 2: 300 m ³ /h Velocità 3: 480 m³/h
Filtro HEPA 14	Filtra 99.995% particelle diametro >0.1 micron
Luce UV	Attivazione manuale con spegnimento automatico a 1 min



Normeditec

Applicazioni cliniche

Ventilazione per ambulatori veterinari e ambienti operatori.

Operio CLINIC può essere utilizzato per migliorare le condizioni asettiche e per eseguire piccoli interventi di chirurgia veterinaria in piccoli ambienti ambulatoriali.

Operio CLINIC può essere utilizzato per **migliorare il livello di asepsi durante la chirurgia veterinaria** in sala operatoria ed ovunque. I vari livelli di purificazione dell'aria pulita possono essere utilizzati per adattare il grado di asepsi desiderato in base al tipo di operazione. È facile da installare e può essere trasportato tra le sale operatorie e i più vari ambienti.

***Operio CLINIC:
Alto livello asettico con budget limitato.***



NORMEDITEC S.R.L.

Via De Gasperi 19 43018, Sissa Trecasali

Tel.0521 878 949 Tel.348 730 2445 – 331 185 9110 Fax.0521 363 731

www.normeditec.com info@normeditec.com

Normeditec

Sovrapressione e numero di ricambi/ora.

Ventilazione meccanica controllata per ambulatori veterinari.


Il dispositivo sanifica un volume d'aria di 480 m³ ogni ora.
Per un ambulatorio standard di 25m² (2.7 metri di altezza) significa che **il dispositivo filtra l'aria dell'ambulatorio ogni 7 minuti.**

CREARE SOVRAPRESSIONE e AUMENTARE il numero di RICAMBI/ORA.

Operio CLINIC è un dispositivo mobile per la sanificazione dell'aria basato su filtri HEPA 14 che elimina il 99.995% delle particelle batteriche, virali, polveri, pulviscolo e qualsiasi particella aerodispersa.

Operio Clinic può essere collegato all'aria esterna per fornire aria fresca nella stanza e per creare una pressione in eccesso rispetto agli ambienti circostanti.

Il modo più semplice ed economico per creare una sovrappressione o incrementare il numero di ricambi d'aria.

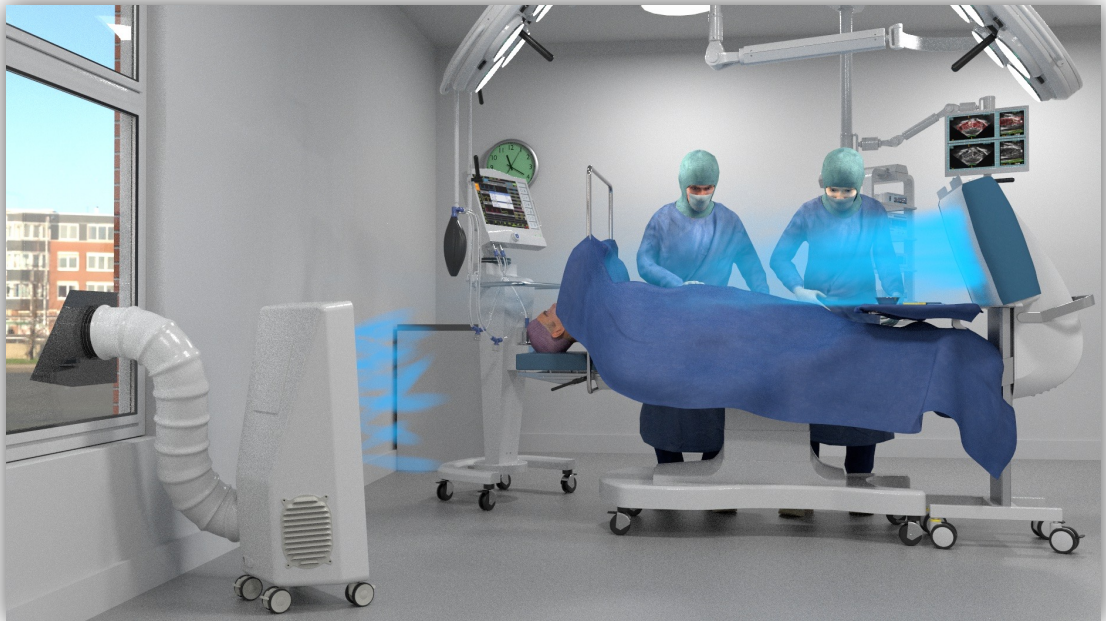

NORMEDITEC S.R.L.

Via De Gasperi 19 43018, Sissa Trecasali

Tel.0521 878 949 Tel.348 730 2445 – 331 185 9110 Fax.0521 363 731

www.normeditec.com info@normeditec.com

Normeditec